

INTRODUCCIÓN

Si estás buscando el mejor tratamiento para las cicatrices de acné, el microneedling con el dispositivo 1NEED Pro de Campomats es una auténtica revolución.

En nuestro nuevo video seguimos paso a paso el tratamiento de Sara, quien llevaba tiempo luchando contra cicatrices de acné profundas. Este innovador procedimiento ayuda a suavizar la piel mientras estimula la regeneración natural.

Encontrarás el enlace para ver el video completo al final de este artículo.

POR QUÉ EL 1NEED PRO OFRECE EL MEJOR TRATAMIENTO PARA LAS CICATRICES DE ACNÉ

La clave de la innovación reside en el cartucho de aguja única, una solución patentada disponible exclusivamente por Campomats.

El médico puede ajustar la profundidad de la aguja directamente desde el mango (0-2,5 mm), garantizando un control total durante el procedimiento.

De este modo, cada sesión se personaliza con precisión según el tipo de piel y el nivel de confort del paciente.

La aguja única permite tratar de forma específica las cicatrices atróficas de acné, rompiendo el tejido fibrótico y estimulando la remodelación del colágeno justo donde se necesita, sin causar trauma innecesario en la piel circundante.

PROTOCOLO PASO A PASO PARA MÉDICOS

Este protocolo describe cómo realizar un tratamiento de microneedling con 1NEED Pro y el cartucho de aguja única para tratar cicatrices de acné.

1. Preparación del paciente

- Anestesia: aplicar crema anestésica tópica (por ejemplo, lidocaína al 5%) durante 20-30 minutos. Retirar completamente antes de comenzar.
- Evaluación: analizar el tipo y la profundidad de las cicatrices (ice-pick, rolling, boxcar).
- Limpieza: desinfectar la zona a tratar con una solución antiséptica a base de clorhexidina.

2. Configuración del dispositivo


- Utilizar el mango 1NEED Pro con el cartucho de aguja única (1PM).
- Ajustar la profundidad de la aguja según la cicatriz:
 - Cicatrices superficiales: 0,5-1,0 mm
 - Cicatrices medias: 1,0-1,5 mm
 - Cicatrices profundas: 1,5-2,5 mm
- Ajustar la velocidad a un nivel alto para lograr máxima precisión y confort.

Por ejemplo:

- Cicatrices pequeñas: se trabaja directamente dentro de la depresión para alisar la superficie.
- Cicatrices más amplias: se utiliza un ángulo de 30° para liberar el tejido y estimular la producción de colágeno.

3. Técnica de microneedling

- Sostener el mango en un ángulo de 30° respecto a la superficie de la piel.
- Realizar movimientos manuales controlados, tratando cada cicatriz individualmente.
- Para cada cicatriz:
 1. Insertar la aguja a 30° para romper las bandas fibróticas bajo la base.
 2. Luego realizar inserciones perpendiculares (90°) para inducir colágeno de forma uniforme.
- Tratar toda el área afectada de manera gradual, cicatriz por cicatriz.

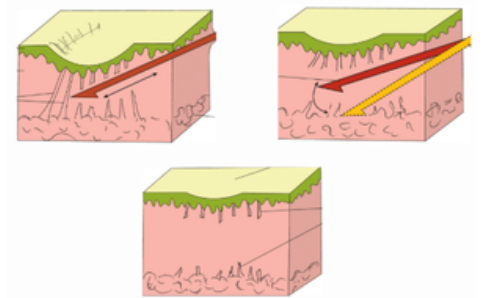

Consejo: debe observarse un leve sangrado puntual, indicativo de una correcta estimulación dérmica. Evitar un exceso de pasadas para prevenir traumatismos innecesarios.

4. Aplicación post-tratamiento

Inmediatamente después del procedimiento:

- Aplicar ácido hialurónico lineal de bajo peso molecular (no reticulado) sobre el área tratada.
- Esto ayuda a mantener la hidratación y acelerar la regeneración cutánea.
- Masajear suavemente hasta su completa absorción a través de los microcanales.

5. Impulso de regeneración

Inmediatamente después del procedimiento:

- Aplicar la 1NEED ProLine Exosome Biomask durante 10–15 minutos.
 - Esta mascarilla avanzada contiene exosomas e ingredientes botánicos calmantes que reducen el enrojecimiento, alivian la piel y aceleran el proceso de curación.

6. Cuidados posteriores

- Puede presentarse un eritema leve (enrojecimiento) durante 12–24 horas.
- Indicar al paciente:
 - No aplicar maquillaje durante 24 horas.
 - Usar protector solar de amplio espectro SPF 50 a diario.
 - Evitar productos exfoliantes o activos (AHA/BHA/retinoides) durante al menos 3 días.



Recuperación y resultados

- La piel se muestra ligeramente enrojecida pero suave e hidratada tras el procedimiento.
- La mejora es visible desde la primera sesión, con una remodelación progresiva en las semanas siguientes.
- Para resultados óptimos, se recomienda una serie de 3 a 10 sesiones, espaciadas cada 4 semanas.

Experiencia de Sara tras 2 sesiones

“He tenido acné durante mucho tiempo y mi piel estaba llena de marcas.

Después del tratamiento, noté inmediatamente que mi piel estaba mucho más lisa y estoy realmente feliz con los resultados.”

Mira el procedimiento completo en nuestro último video de YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=pZRD7ktGQFA&t=2s>